

# Adattatore per sonde monouso

N. Parte 2508-P-8026

## Istruzioni per l'uso

### 1 Avvertenze e precauzioni

- Da usarsi solo con Keeler Cryomatic (2509-P-1000) e sonda crio monouso (2508-P-7022)
- Controllare la sonda prima dell'uso – non usare o riparare se danneggiata o deformata
- Scollegare la sonda dall'adattatore solo quando il sistema è depressurizzato
- Pressione massima 5860 kPa (850 psi)
- Se in dubbio, consultare il manuale Cryomatic
- Un intervento non autorizzato invaliderà la garanzia
- Questo dispositivo deve essere utilizzato da personale qualificato esperto nell'uso di apparecchiature oftalmiche
- Ai sensi delle leggi federali statunitensi, questo dispositivo può essere venduto soltanto su ordine di un medico

### 2 Funzionamento

Collegare l'adattatore della sonda alla consolle Cryomatic allineando il giunto sulle battute di centraggio della consolle e spingendo finché non si sente un clic (è impossibile collegare il giunto nel senso sbagliato – la posizione giusta è con il pulsante di rilascio in alto).

Collegare la sonda monouso inserendone la spina nell'adattatore e spingendo la sonda saldamente e dritta contro il collare (1).

Entrerà in funzione il nottolino di sicurezza (2) e l'anello di bloccaggio (3) scatterà verso la sonda, a conferma che la sonda è stata collegata nel modo appropriato.

Prima dell'uso assicurarsi che il fermaglio di sicurezza posteriore (4) sia in posizione completamente abbassata – non si deve assolutamente usare se il fermaglio di sicurezza non è in posizione (vedi figura a pag. 2).




Il sistema inizia automaticamente un ciclo di spurgo di 90 secondi. Durante il ciclo di spurgo, insieme al simbolo della sonda compare un simbolo animato di Attesa.



Tre brevi bip segnalano il completamento del ciclo di spurgo. L'apparecchiatura è ora pronta per l'uso, come indicato dal timer e dal simbolo di Pronto.

A questo punto si possono gestire normalmente i cicli di congelamento per mezzo dell'interruttore a pedale Cryomatic (vedi manuale di istruzioni Cryomatic).

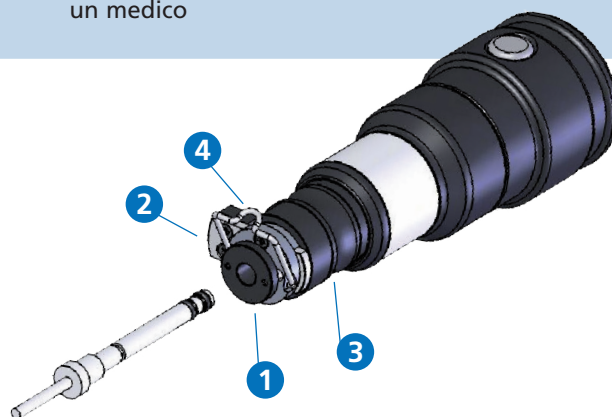

### 3 Simboli

**STERILE EO** Sterilizzato con ossido di etilene



Produttore



Attenzione



Il marchio CE indica che questo prodotto è stato testato e risulta conforme alle norme della direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici



Non riutilizzare



Data di scadenza



Codice di partita/Numero di lotto/  
Numero di partita




Consultare le istruzioni per l'uso



Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio e nelle istruzioni indica che questo prodotto è stato immesso sul mercato dopo il mese di agosto del 2005 e che non deve essere trattato come i rifiuti domestici. Solo UE.

Segue a tergo ►

## 4 Scollegamento della sonda monouso

 La sonda monouso deve essere scollegata dall'adattatore solo quando il sistema è depressurizzato, come indicato dal simbolo di pronto.

Per scollegare la sonda monouso dall'adattatore, allontanare l'anello di bloccaggio (1) dalla sonda e azionare il nottolino (2).

La sonda monouso dovrebbe essere espulsa delicatamente dall'adattatore. Sollevare il fermaglio di sicurezza (3) e staccare la spina della sonda dall'adattatore.

Per staccare l'adattatore stesso dalla consolle Cryomatic, azionare il pulsante di rilascio (4).



## 5 Pulizia, manutenzione e smaltimento

Se necessario, si può pulire l'adattatore della sonda con un panno a gettare imbevuto di detergente neutro e acqua calda. Non usare preparati abrasivi o pagliette. Durante la pulizia, evitare di bagnare i contatti elettrici.

L'adattatore della sonda non contiene nessun componente che richieda manutenzione da parte dell'utente e la manutenzione a cui deve provvedere l'operatore si limita al controllo, prima di ogni uso, che l'adattatore non presenti segni di danneggiamento.

L'adattatore della sonda deve essere controllato annualmente da personale qualificato Keeler.

**Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato Keeler o da loro rappresentanti.**

Assicurare che lo smaltimento di quest'apparecchiatura avvenga in conformità con le norme locali. In caso di dubbio, rivolgersi al fornitore.

## 6 Garanzia del prodotto

Due anni di garanzia per difetti di lavorazione, materiale e manodopera. La garanzia sarà subordinata alla manutenzione ordinaria e non coprirà problemi meccanici o di calibrazione dovuti a mancata manutenzione, uso improprio, condizioni sbagliate di trasporto o condizioni inappropriate di stoccaggio.

Prodotto da 

Keeler Limited, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire SL4 4AA Regno Unito  
Numero verde: 0800 521251 Tel: +44 1753 857177 Fax: +44 1753 827145

Distribuito da

USA Sales Office, Keeler Instruments Inc, 3222 Phoenixville Pike, Building #50, Malvern, PA 19355, USA. Numero verde: 1 800 523 5620 Tel: 1 610 353 4350 Fax: 1 610 353 7814



2509-P-8019 Edizione E

**Keeler**